

MANUAL DE UTILIZARE

Rollator cu 4 roți

Cod produs: FUTURO



1. Caracteristici

Rollatorul cu patru roți este fabricat din fibră de carbon acoperită cu vopsea metalizată. Are roți mari, cu diametrul de 8", mânere reglabile pe înălțime, cu prize anatomice, frâne cu funcție de parcare, un scaun cu spătar, o geantă practică și suport pentru baston. Structura este bazată pe un cadru tip cruce și o secțiune transversală ovală a tuburilor, ceea ce mărește semnificativ rezistența la presiunea axială.

Setul include: cadru cu scaun, roți din față și din spate, spătar, geantă pentru cumpărături și suport pentru baston.



Elemente ale rulotorului:

1. Mâner
2. Frână de parcare
3. Scaun
4. Spătar
5. Sac
6. Lacăt pliabil cu bandă elastică
7. Reglare pe înălțime
8. Cablu de frana
9. Roți din spate și față de 8".


2. Aplicație

Rollator este conceput pentru pacienții cu mobilitate redusă care au nevoie de sprijin și ajutor stabil în timpul mersului. De asemenea, este recomandat

persoanelor în vârstă ca ajutor în menținerea echilibrului pentru a îmbunătăți confortul mersului și a asigura siguranța împotriva caderii. Utilizarea mersului are un efect pozitiv asupra revenirii la activitate a persoanelor cu probleme de locomoție și înclinare pentru a ridica. Garantează o mai bună stabilizare, sprijin și siguranță în timpul mersului.

3. Asamblare

Desfășurarea

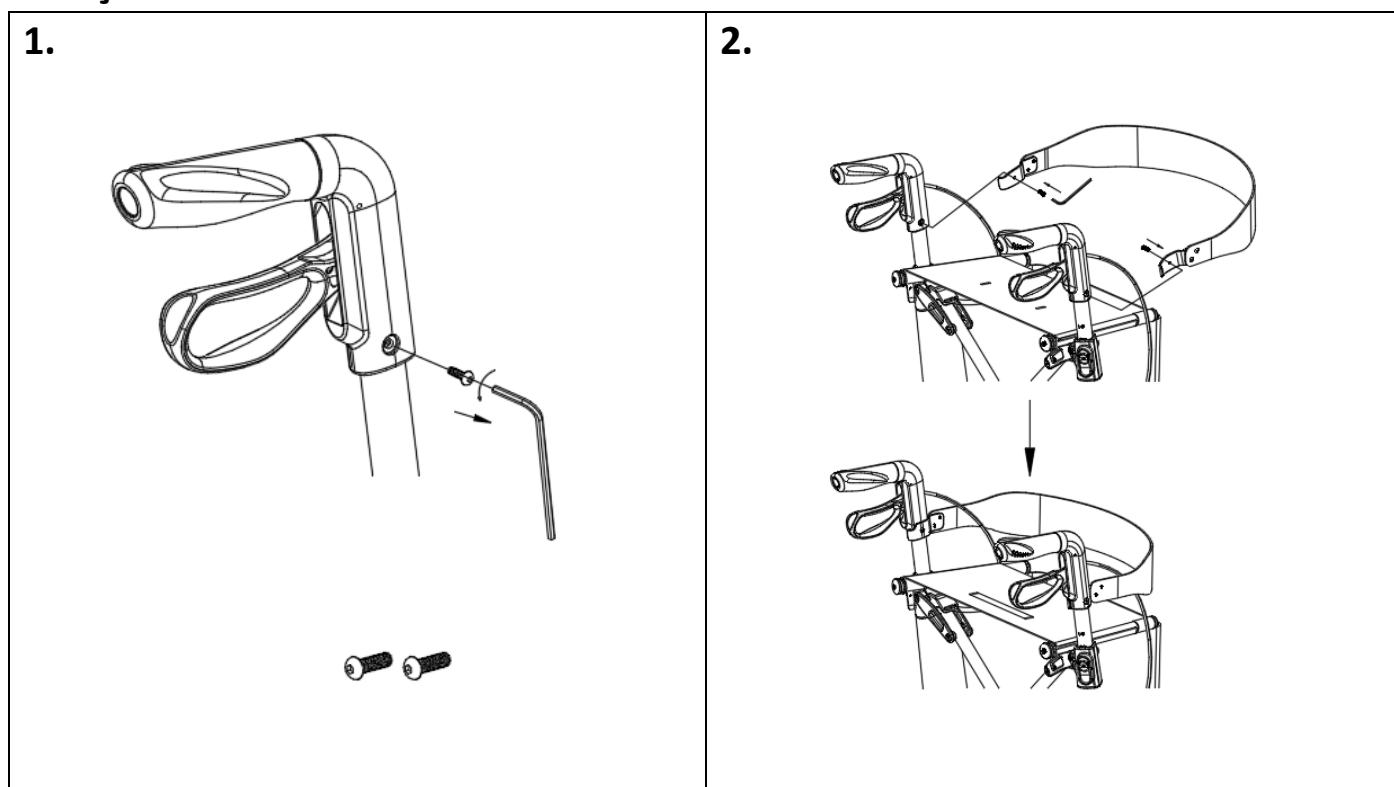

- Scoateți banda elastică de pe încuietoarea pliabilă.
- Pentru a desface rulotor, apucați ambele mânere și trageți-le spre exterior.
- Apăsați scaunul în jos până când este complet desfășurat (sunet caracteristic de „clic”)
- Deșurubați șuruburile de montare ale mânerelor (imaginea 1).
- Atașați spătarul la mânere folosind șuruburi (imaginea 2).

Pliere

- Pentru a plia rulotor, trageți scaunul în sus
- Asigurați-vă că rulotor este pliat corect.
- Încuietoare pliabilă securizată cu bandă elastică.

Reglarea înălțimii mânerelor

Pentru a regla înălțimea mânerului :

- Apăsați frâna în jos pentru a activa frâna de parcare și imobilizați rulător.
- Apăsați și mențineți apăsată clema de reglare.
- Reglați înălțimea mânerelor.
- Eliberați clema pentru a bloca înălțimea reglată a mânerelor. Trageți mânerul în sus și în jos de mai multe ori pentru a verifica dacă este blocat corect.
- Reglați înălțimea celui de-al doilea mâner într-un mod similar.

NOTA! Ambele mânere trebuie setate la aceeași înălțime.

Funcția franelor

- Pentru a opri rulător, trageți mânerul de frână în sus, apoi țineți-l.
- Când nu este în mișcare sau nu folosiți scaunul, blocați frâna trăgând în jos mânerul de frână.
- Pentru a elibera frâna de parcare, trageți mânerul în sus .

4. Date tehnice

Lățimea totală după desfacere	62 cm
Lățimea totală după pliere	22 cm
Lungime totală	65 cm
Latimea scaunului	46 cm
Înălțimea scaunului de la sol	62 cm
Reglarea înălțimii mânerului	78-92 cm
Greutatea rollator	5,3 kg
Greutatea sacului de cumpărături	0,6 kg
Capacitate maxima	150 kg
Capacitate maximă a pungii de cumpărături	5 kg
Culoarea cadrului	Roșu, negru mat

5. Note

Timago International Group nu poartă responsabilitatea utilizării necorespunzătoare a rollator-ului, nerespectării regulilor de siguranță și utilizării abuzive.

6. Întreținere

- Curățați cadrul cu o cârpă umedă și uscați-l bine.
- Nu folosiți agenți puternici de lustruire, deoarece aceștia pot deteriora straturile de protecție.
- Îndepărtați murdăria de pe părțile mobile ale cadrului de mers (balamale, șuruburi de fixare, încuietori) în mod regulat.

7. Condiții de depozitare și transport

Dispozitivul nu trebuie expus la lumina directă a soarelui, apă sau umiditate.

8. Informații privind garanția

Toate produsele distribuite de compania noastră sunt acoperite de o garanție, ale cărei condiții sunt descrise în cardul de garanție disponibil pe site-ul nostru. Vă rugăm să contactați retailerul de la care ați achiziționat produsul. Vă rugăm să rețineți că, în scopuri de garanție, trebuie păstrată dovada de cumpărare (chitanță sau factură)

9. Marcaje

	Numărul de referință		Producător
	Numărul seriei		Data de producție
	Numărul de serie		Dispozitiv medical
	Atenție		Citiți instrucțiunile
	Producătorul a evaluat conformitatea cu cerințele esențiale pentru dispozitivele medicale.		

Întreaga ofertă vă stă la dispoziție la distribuitorii noștri. Aflați mai multe la **www.timago.com**

Vă mulțumim că ați ales Timago!