

ZOLL AED 3™

Ghid de pornire rapidă



ZOLL®

Bun venit

Vă mulțumim că ați ales ZOLL AED 3™ ca defibrilator extern automat, cel mai avansat AED din lume în prezent. Urmăriți aceste instrucțiuni simple pentru a configura AED 3 în doar câteva minute. După finalizarea configurării, notați numărul de serie și accesați www.zollaed3.com pentru a înregistra AED 3 în vederea obținerii garanției extinse.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați ZOLL la +1-978-421-9655 sau prin e-mail la techsupport@zoll.com, ori contactați distribuitorul autorizat de la care ați achiziționat AED 3.

Conținut

Dosarul de documentație:

- Ghid de pornire rapidă
- Ghid de referință/Poster de salvare ZOLL AED 3
- Manual de utilizare ZOLL AED 3

În cutie:

- ZOLL AED 3
- Dosarul de documentație
- Electrozi CPR Uni-padz™
- Baterie ZOLL AED 3

Finalizați înregistrarea AED-ului


Accesați www.zollaed3.com pentru a:

- Înregistra produsul pentru garanția extinsă gratuită de 2 ani
- Primi informații despre configurarea contului ZOLL Online pentru încărcarea și gestionarea datelor evenimentelor clinice în ZOLL Case Review™


Configurarea ZOLL AED 3




Scoateți tot conținutul din cutia de transport.

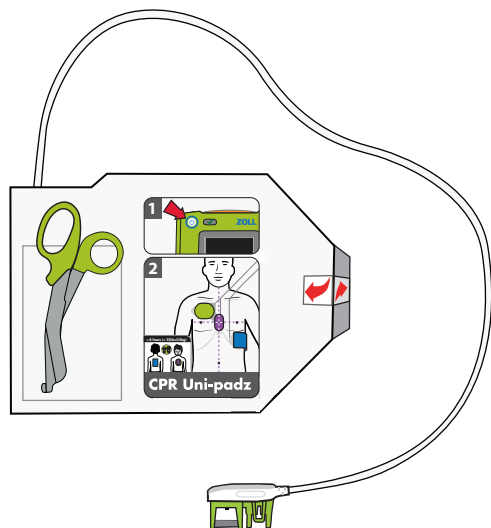


Scoateți electrozii CPR Uni-padz din cutia lor de protecție.

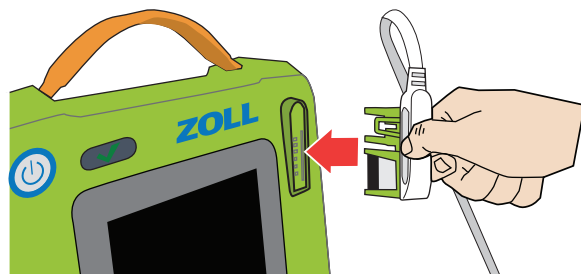


Conectați mufa cablului electrozilor CPR Uni-padz la portul pentru electrozi al AED 3.

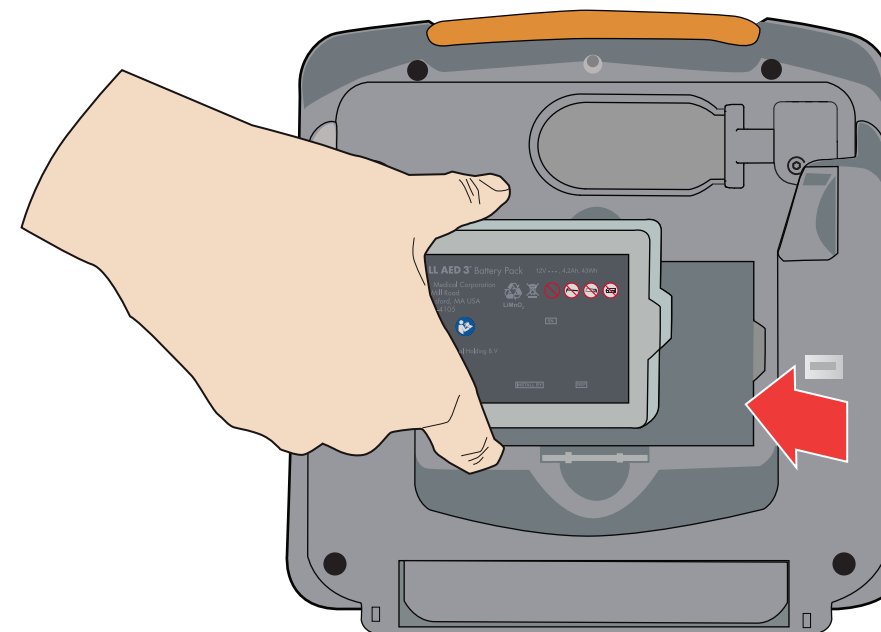

Scoateți bateria AED 3 din cutia de transport. Țineți bateria de clapetele laterale, cu eticheta orientată spre exterior. Introduceți bateria în partea din spate a AED-ului până când se fixează cu un clic, aliniind creștătura de la capătul bateriei cu forma corespunzătoare din compartimentul bateriei.

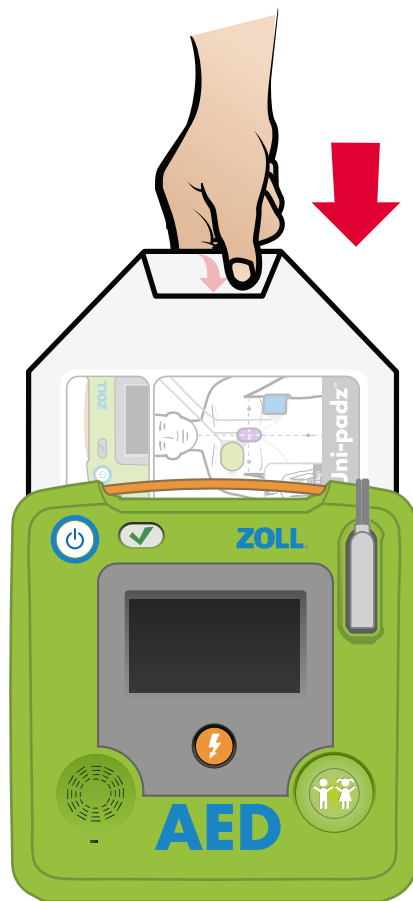

ZOLL AED 3 va efectua un autotest automat. În timp ce autotestul rulează, introduceți electrozii CPR Uni-padz în partea din spate a AED-ului, astfel încât eticheta de pe pachet să fie orientată spre dumneavoastră.

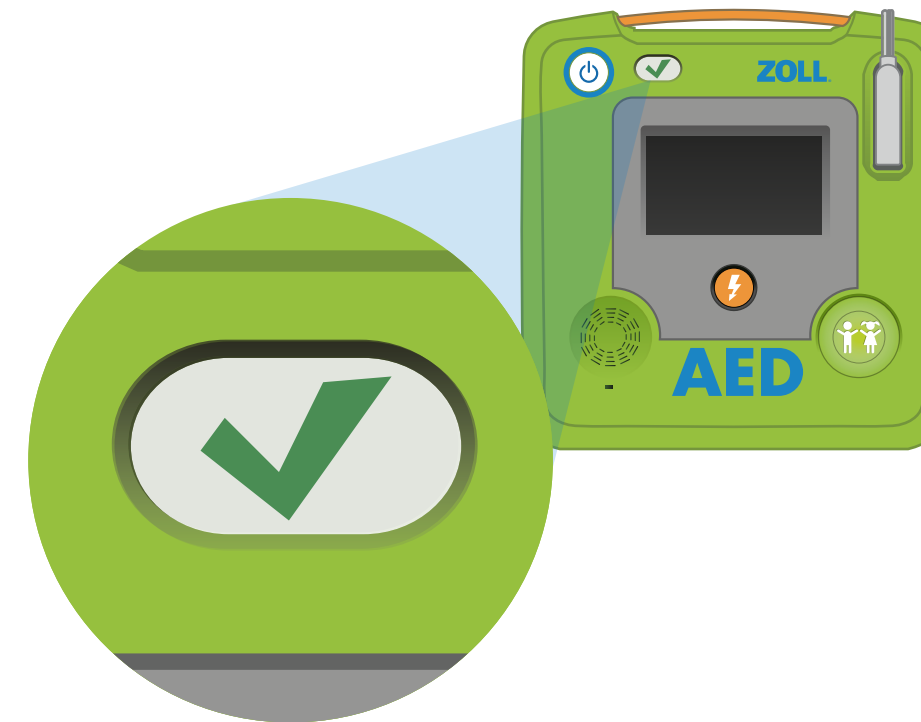

După finalizarea autotestului AED 3, confirmați că acesta a fost trecut ascultând mesajul vocal „Aparat OK” sau verificând simbolul bifei verzi din fereastra indicatorului de stare. AED 3 este acum gata de utilizare. Dacă aveți întrebări, consultați manualul de utilizare inclus în dosarul de documentație.

Întrebări:

Contactați Serviciul Tehnic ZOLL sau
reprezentantul autorizat ZOLL local

Serviciul Tehnic ZOLL:

Telefon: +1-978-421-9655

E-mail: techsupport@zoll.com