Minden jog fenntartva. ©2025 UAB Kasko Group

RO

SIMBOLURI

În aceste instrucțiuni de utilizare, avertismentele sunt indicate prin simboluri. Simbolurile de avertizare sunt însoțite de un titlu care indică gravitatea pericolului sau informații de bază.

Oferă informații de bază, recomandări și informații pentru o utilizare eficientă și fără probleme.

AVERTIZARE / ATENȚIE - pentru a indica faptul că este necesară prudență atunci când utilizați dispozitivul. Pentru a indica faptul că situația actuală necesită conștientizarea sau acțiunea operatorului pentru a evita consecințele nedorite.

ATENȚIE! Acest semn este utilizat pentru părți foarte importante privind siguranța dumneavoastră. Vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

AVERTIZARE
Orice altă utilizare sau utilizare incorectă poate duce la situații periculoase.

AVERTIZARE
Risc de accidente și vătămări grave. În cazul în care scaunul cu rotile este reglat greșit, pot avea loc accidente soldate cu vătămări grave. Ajustările la scaunul cu rotile trebuie efectuate întotdeauna de către un distribuitor autorizat.

AVERTIZARE
Risc datorat stilului de conducere neadecvat condițiilor. Există riscul de derapare pe sol umed, pietriș sau teren accidentat. Adaptați întotdeauna viteza și stilul de conducere la condiții (vreme, suprafață, capacitate individuală etc.).

Kid-Man® este o proprietate a UAB Kasko Group înregistrată la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.

AVERTIZARE
Risc de rănire. În cazul unei coliziuni, puteți suferi leziuni ale părților corpului care se extind dincolo de scaunul cu rotile (de exemplu, picioare sau mâini). Evitați o coliziune fără frânare; nu intrați niciodată frontal într-un obiect; conduceți cu atenție prin pasaje înguste.

AVERTIZARE
Risc datorat scăpării de sub control a scaunului cu rotile. La viteză mare, puteți pierde controlul scaunului dvs. cu rotile și vă puteți răsturna. Nu depășiți niciodată o viteză de 7 km/h. Evitați coliziunile în general. Nu folosiți scările rulante. Nu coborâți în sens invers pe o pantă.

ATENȚIE
Risc de arsură. Componentele scaunului cu rotile se pot încălzi atunci când sunt expuse la surse externe de căldură. Nu expuneți scaunul cu rotile la lumina puternică a soarelui înainte de utilizare. Înainte de utilizare, verificați temperatura tuturor componentelor care vin în contact cu pielea.

ATENȚIE
Risc de a vă prinde degetele. Există întotdeauna riscul de a vă prinde, de exemplu, degetele sau brațele în părțile mobile ale scaunului cu rotile.

AVERTIZARE
Risc de accidente. Dispozitivele de siguranță care sunt setate incorect sau care nu mai funcționează (frâne, dispozitiv anti-basculare) pot provoca accidente. Verificați întotdeauna dacă dispozitivele de siguranță funcționează înainte de a utiliza scaunul cu rotile și verificați-le periodic la un dealer autorizat.

AVERTIZARE
Risc de accidente. Pentru o utilizare corectă și sigură, vă recomandăm să urmați instrucțiunile de siguranță în timpul folosirii scaunului cu rotile. Acest scaun cu rotile a fost proiectat pentru a asigura stabilitatea în timpul șederii. Fiecare mișcare a scaunului cu rotile afectează punctul de greutate, ceea ce poate cauza răsturnarea scaunului cu rotile.

AVERTIZARE
Risc de sufocare. Vă rugăm să protejați copiii sub vârsta de cinci ani de accesul facil la scaunul cu rotile. Datorită elementelor mici utilizate în construcție, copiii le pot înghiți sau se pot sufoca.

Toate drepturile rezervate. ©2025 UAB Kasko Group

ATENȚIE
Scaunul cu rotile este potrivit doar pentru o singură persoană.

ATENȚIE
Țineți-vă picioarele pe tălpi atunci când vă deplasați. Nu stați pe tălpi. Mențineți un echilibru adecvat în orice moment. Utilizatorii nu trebuie să își mute centrul de greutate în afara zonei de ședere.

ATENȚIE
Vă recomandăm să consultați medicul specialist pentru sfaturi privind transferul în și din scaunul cu rotile. Frânele de parcare trebuie să fie întotdeauna aplicate la transfer. Frânele de parcare nu sunt adecvate pentru încetinirea scaunului cu rotile.

ATENȚIE
Fiți atenți la pericolele din mediul înconjurător, cum ar fi ușile înguste, treptele, aparatele electrocasnice, jucăriile copiilor etc. Nu întindeți mâna pentru a lua obiecte mai departe decât se întinde brațul dumneavoastră.

AVERTIZARE
Risc de accidente. Nu încercați să urcați sau să coborâți o pantă cu o peliculă de apă, gheață sau ulei. Nu încercați să opriți scaunul cu rotile în timp ce vă aflați pe o suprafață înclinată.

AVERTIZARE
Risc de accidente. Nu încercați să treceți peste borduri sau obstacole. Acest lucru poate cauza răsturnarea scaunului dvs. cu rotile și vă poate provoca vătămări corporale sau deteriorarea scaunului cu rotile.

AVERTIZARE
Risc de accidente. Nu lăsați niciodată un scaun cu rotile neocupat pe o pantă sau în alt loc care poate provoca răniri persoanelor sau lucrurilor din jur.
Durata de viață preconizată este de 5 (cinci) ani, presupunând că produsul este utilizat zilnic și în conformitate cu instrucțiunile de siguranță, cu instrucțiunile de întreținere și cu destinația de utilizare, menționate în aceste instrucțiuni de utilizare. După aceea, scaunul cu rotile trebuie să fie reciclat. Nu aruncați scaunul dvs. cu rotile împreună cu deșeurile comune (consultați capitolul “ELIMINARE”).

Kid-Man® este o proprietate a UAB Kasko Group înregistrată la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.

GENERALITĂȚI

INTRODUCERE

Acest manual de utilizare conține informații importante privind utilizarea produsului. Pentru a garanta siguranța în utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile și respectați recomandările de siguranță prezentate în acesta.

Tipul scaunului rulant și numărul său unic de identificare pot fi găsite pe eticheta lipită pe placa cotierei și pe bara transversală metalică de sub șezut.
De exemplu: un autocolant rotund cu numărul (ex. 51 sau 55) pe partea interioară a cotierei indică faptul că dimensiunea dispozitivului (lățimea șezutului) este de 51 sau 55 cm.

Rețineți că acest document poate conține secțiuni care nu se aplică produsului dumneavoastră, deoarece este destinat tuturor modelelor disponibile. Dacă nu este specificat altfel, fiecare secțiune din acest document se aplică tuturor modelelor produsului.

PREFAȚĂ

Vă mulțumim pentru încrederea arătată în Kid-Man®. Fiecare produs este verificat în fabrică și ne-a părăsit în stare impecabilă. Vă dorim mult succes și sperăm că Scaunul cu rotile UAB Kasko Group | Kid-Man® va avea un impact pozitiv asupra vieții dumneavoastră de zi cu zi.

GARANȚIE

Oferim o garanție de 24 de luni de la data achiziției. Orice modificări neautorizate efectuate fără aprobarea producătorului vor atrage nulitatea răspunderii. Aceasta include depășirea sarcinilor maxime ale utilizatorului și utilizarea produsului în mod necorespunzător. Garanția este valabilă numai cu cardul de garanție complet completat. UAB Kasko Group | Kid-Man® (denumit în continuare producător), după ce primește articolul reclamat de la cumpărător în termen de 4 săptămâni, decide dacă problema este tratată în cadrul garanției. Dacă problema nu este acoperită de garanție și clientul este de acord, producătorul, dacă este posibil, rezolvă problema. Toate costurile, inclusiv costurile de transport, ar trebui să fie acoperite de client. Repararea în garanție nu prelungește garanția.

Toate drepturile rezervate. ©2025 UAB Kasko Group

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele care rezultă din:
- Nerespectarea Instrucțiunii de utilizare;
- Utilizare incorectă;
- Uzură naturală;
- Asamblarea sau configurarea incorectă de către cumpărător sau modificări tehnice ale unei terțe părți;
- Utilizarea de accesorii terțe neaprobate în locul accesoriilor aprobate de Producător;
- Modificări neautorizate și/sau utilizarea unei piese de schimb necorespunzătoare

STANDARDE ȘI REGULAMENTE

Scaunul cu rotile respectă cerințele din:
a) standardul EN 12183:2022 Scaune cu rotile manuale - Cerințe și metode de testare;
b) REGULAMENTUL (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor Consiliului 90/385/CEE și 93/42/CEE.

DURATA DE VIAȚĂ

Durata de viață preconizată este de 5 (cinci) ani, presupunând că produsul este utilizat zilnic și în conformitate cu instrucțiunile de siguranță, instrucțiunile de întreținere și utilizarea prevăzută, menționate în aceste instrucțiuni de utilizare.
După aceea, scaunul cu rotile trebuie să fie reciclat. Nu aruncați scaunul dvs. cu rotile împreună cu deșeurile comune (consultați capitolul “ELIMINARE”).

Kid-Man® este o proprietate a UAB Kasko Group înregistrată la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.

INFORMAȚII DESPRE PRODUCĂTOR

Producător: UAB “Kasko Group” (marcă înregistrată Kid-Man®)
Adresa: A.Vivulskio 12D, Vilnius, LT-03221, Lituania
Telefon: +370 5 265 0000
E-mail: info@kid-man.com
Site web: www.kid-man.com

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Produs: SCAUN CU ROTILE DE MARE CAPACITATE
Model: SteelMan XL
REF: 04-010B/51; 04-010B/55

AVERTIZARE
Risc de accidente și vătămări grave. Scaunul cu rotile nu este destinat utilizării în autovehicul.

SCOPUL PRECONIZAT ȘI INDICAȚII

Scaunul cu rotile SteelMan XL este propulsat manual și trebuie utilizat numai pentru transportul independent sau asistat al unei persoane cu handicap cu dificultăți de mobilitate temporare (de exemplu, oase rupte sau leziuni ale picioarelor) sau pe termen lung (de exemplu, paralizie, probleme musculo-scheletice, probleme neurologice, echilibru sau probleme de mers). Acesta poate fi utilizat atât în interior, cât și în exterior. Scaunul cu rotile este propulsat prin deplasarea jantelor de împingere, montate pe roțile din spate. Fie de către însoțitor.

Acest scaun cu rotile trebuie să fie abonat și adaptat la starea dumneavoastră de sănătate specifică.

CONTRAINDICAȚII

Nu există contraindicații cunoscute, atunci când se utilizează scaunul cu rotile conform destinației.

Toate drepturile rezervate. ©2025 UAB Kasko Group

UTILIZATORI VIZAȚI


AVERTIZARE
Risc de accidente. Este interzisă depășirea sarcinii maxime de siguranță a scaunului cu rotile.
Dispozitivul este indicat pentru a oferi mobilitate persoanelor aflate în poziție șezândă limitată. Atunci când este utilizat fără asistent, acesta trebuie utilizat numai de persoane care sunt capabile din punct de vedere fizic și mental să utilizeze scaunul cu rotile în siguranță (de exemplu, să se propulseze, să conducă, să frâneze).

ATENȚIE
Scaunul cu rotile este adecvat pentru utilizarea de către alte persoane. Pentru a face acest lucru, scaunul cu rotile trebuie mai întâi curățat și dezinfectat complet. Apoi, toate componentele scaunului cu rotile trebuie să fie verificate de un service autorizat pentru starea generală, uzură și reparate dacă este necesar.

ETICHETA PRODUSULUI

Eticheta de identificare este atașată la cadrul scaunului dumneavoastră cu rotile (a se vedea imaginea).

1. Produs
2. Model
3. Dimensiune (lățimea scaunului)
4. Sarcina maximă
5. Producător / date de contact
6. Data de fabricație
7. Cod UDI / SN
8. Marcaj CE
9. Consultați instrucțiunile de utilizare

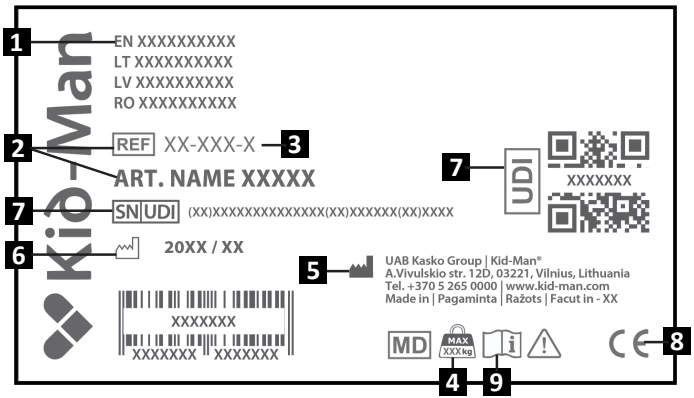

Kid-Man® este o proprietate a UAB Kasko Group înregistrată la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.

CONȚINUTUL PACHETULUI


Scaunul cu rotile SteelMan XL este livrat într-un ambalaj de carton și este gata de utilizare. Este necesar doar să atașați perechea de suporturi pentru picioare pe cadru. După despachetare, vă rugăm să păstrați ambalajul de carton, dacă este posibil. Este posibil să aveți nevoie de el mai târziu pentru depozitare sau pentru returnarea scaunului cu rotile. După primirea coletului, vă rugăm să verificați dacă acesta nu este deteriorat în timpul transportului.


Dacă observați semne de deteriorare, vă rugăm să anunțați compania de transport în același timp.

Vă rugăm să verificați conținutul pachetului și, în cazul în care lipsește oricare dintre piesele de mai jos, luați legătura cu dealerul local.

Conținutul pachetului:

1. 1 x scaun cu rotile pliat
2. 1 x pereche de suport pentru picioare
3. 1 x pernă pentru scaun cu rotile
4. 1 x instrument de reglare
5. 1 x curea pentru călcâi
6. 1 x pereche de anti-răsturnare
7. Instrucțiuni de utilizare

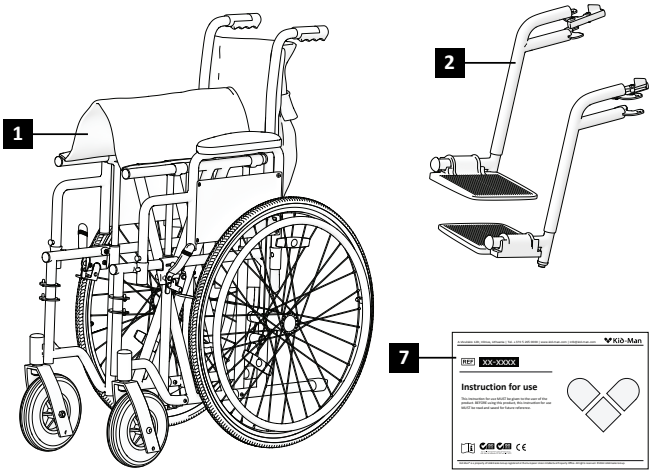

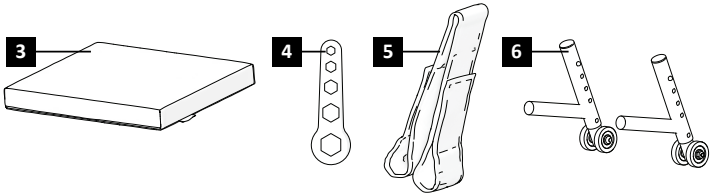


Toate drepturile rezervate. ©2025 UAB Kasko Group

COMPONENTE ȘI FUNCȚII

Prezentare generală

Acesta este un scaun cu rotile cu mecanism de pliere în formă de cruce și cu suporturi pentru picioare rabatabile și detașabile.

1. Spătar
2. Suport pentru brațe
3. Centura de siguranță
4. Pernă pentru scaun cu rotile
5. Scaun
6. Pârghia de balansare a suportului pentru picioare
7. Suport pentru picioare
8. Curea pentru călcâi
9. Placa de picior
10. Mânere de împingere pentru însoțitor
11. Cercuri metalice pentru autopropulsare
12. Roată autopropulsată spate
13. Maneta frânei
14. Suport de osie
15. Antitiper
16. Rotiță față

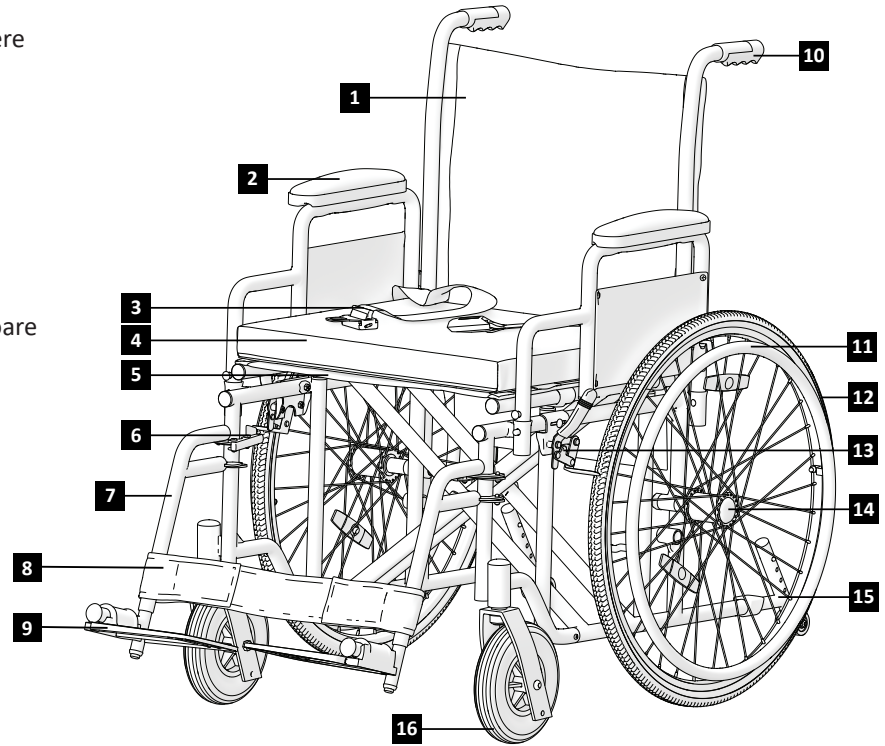

i Complexitățile scaunului dumneavoastră cu rotile pot varia puțin față de cele ale unui scaun cu rotile descris în acest manual datorită dezvoltării continue a produsului.

Kid-Man® este o proprietate a UAB Kasko Group înregistrată la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.

DEPLIEREA ȘI PLIEREA SCAUNULUI CU ROTILE

Pentru a deplia scaunul cu rotile:
- Poziționați scaunul cu rotile lângă dumneavoastră;
- Apăsați cu palma pe marginea scaunului cea mai apropiată de dumneavoastră, astfel încât suprafața acestuia să devină plată, iar țevile șezutului să se așeze complet în suporturile din plastic (Imagine 1). Scaunul trebuie să fie complet desfășurat;
- Puneți suport pentru picioare la locurile lor (Imaginea 2);
- Rotiți suportul pentru picioare în interior (Imaginea 3) pentru a fixa poziția corectă (Cotiera pentru picioare trebuie să stea bine).
- Setați suportul pentru picioare în poziția corespunzătoare/confortabilă: împingeți suportul pentru picioare în jos. Poziția corespunzătoare a suportului pentru picioare este prezentată în imaginea 5.

Nu trebuie să folosiți energia prea mult. Dacă împingeți prea mult, puteți deteriora suportul pentru picioare (de exemplu, îl puteți rupe).

Pentru a plia scaunul cu rotile, mai întâi scoateți suporturile pentru picioare sau rabatați plăcuțele acestora (Imagine 6). Dacă este pusă o pernă, scoateți-o. Apoi, așezați mâinile pe partea din față și din spate a șezutului și trageți în sus (Imagine 7).

Pentru a asigura siguranța și a preveni deteriorarea în timpul călătoriei, toate părțile detașabile (cotiere și suporturi pentru picioare) trebuie îndepărtate.

AVERTIZARE
Pericol de prindere a degetului! Aveți grijă să nu prindeți țeava scaunului.

AVERTIZARE
Nu ridicați niciodată scaunul cu rotile de piesele detașabile (cotiere, suporturi pentru picioare). Vă rugăm să vă asigurați că toate piesele detașabile sunt scoase. Piesele detașabile din scaunul cu rotile sunt suportul pentru brațe, suportul pentru picioare și perna. Cum să le îndepărtați, consultați aceste Instrucțiuni de utilizare. După îndepărtarea pieselor, vă rugăm să pliați scaunul cu rotile. După ce este pliată, o puteți ridica cu ușurință ținând-o cu ambele mâini pe cadru.

UTILIZARE

Acest scaun cu rotile a fost proiectat pentru a asigura stabilitatea în timpul șederii. Fiecare mișcare a scaunului cu rotile afectează punctul de greutate, ceea ce poate cauza răsturnarea scaunului cu rotile. Pentru a vă spori siguranța, puteți utiliza centura de siguranță.

AVERTIZARE
Nu există poziții de puncte destinate să suporte sarcini suplimentare.

Toate drepturile rezervate. ©2025 UAB Kasko Group

ÎNCLINAREA ÎN FAȚĂ

AVERTIZARE
Risc de cădere. Dacă vă aplecați în față din scaunul cu rotile, puteți cădea din acesta. Nu vă aplecați niciodată prea mult în față și nu vă deplasați în față în scaun pentru a ajunge la un obiect. Nu vă aplecați în față între genunchi pentru a ridica ceva de pe podea.

ATINGEREA UNUI OBIECT DIN SCAUNUL CU ROTILE

Doar brațele pot fi întinse peste scaunul scaunului cu rotile. Corpul și capul trebuie să rămână în limitele scaunului (a se vedea Imaginea 9-10).

TRECEREA PE TROTUAR

Vă recomandăm să urcați pe trotuar cu ajutorul unei persoane însoțitoare. Pașii pe care aceasta trebuie să îi urmeze:
- Poziționați scaunul cu rotile drept în fața bordurii trotuarului.
- Înclinați scaunul cu rotile pe spate și deplasați-l încet spre trotuar, până când roțile din față urcă peste bordură.
- Împingeți scaunul drept înainte până când roțile din spate ating bordura.
- Ridicați scaunul și continuați să îl împingeți înainte până când roțile din spate urcă pe trotuar (Imagine 12).

Atenție: Dacă dispozitivul de protecție împotriva răsturnării nu permite înclinarea suficientă înapoi, se recomandă demontarea temporară a acestuia până când scaunul cu rotile este urcat pe trotuar.

Înclinați scaunul cu rotile în spate exact când sunt îndepărtate dispozitivele anti-basculare.

TRANSFERUL

Vă puteți transfera singur, dacă sunteți suficient de puternic.
Poziționați scaunul cu rotile cât mai aproape de locul în care doriți să vă mutați, cu roțile din față orientate înainte. Acționați frânele. Rabatați suporturile pentru picioare și mutați-le în lateral pentru a elibera spațiu. Îndepărtați cotiera de pe partea în care vă veți deplasa. Deplasați-vă spre locul dorit (Imagine 13). Aplecați-vă în față, sprijinindu-vă cu o mână pe cotiera lăsată și cu cealaltă pe roata din spate. Apoi mișcați corpul către locul unde doriți să vă așezați, distribuind greutatea între brațe și palme. Nu vă sprijiniți pe frâne.

Se recomandă utilizarea unei plăci de transfer pentru a menține mereu un sprijin sub dumneavoastră. Dacă aveți dificultăți în realizarea acestei mișcări, vă recomandăm să solicitați ajutorul unui însoțitor pentru un transfer sigur și facil. Nu uitați: nu vă sprijiniți pe frâne.
În timpul transferului sau la ridicare, nu vă sprijiniți niciodată pe plăcuțele suporturilor pentru picioare.

Kid-Man® este o proprietate a UAB Kasko Group înregistrată la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.

SCĂRI

Vă sugerăm să solicitați ajutorul a două persoane, una în fața scaunului cu rotile și una în spatele acestuia, din cauza dificultății și pericolului de a urca scările. Persoana din spatele scaunului cu rotile înclină scaunul cu rotile înapoi până când acesta este echilibrat. Apoi, împinge scaunul cu rotile împotriva primei trepte, apucând ferm mânerul, pentru a se pregăti să ridice scaunul cu rotile. Persoana din fața scaunului cu rotile apucă părțile laterale ale cadrului din fața scaunului cu rotile și ridică scaunul peste trepte, în timp ce celălalt însoțitor urcă pe următoarea treaptă, repetând primul proces. Nu coborâți scaunul cu rotile până când nu ați depășit ultimul pas al persoanei din fața scaunului cu rotile. Transportul unui scaun cu rotile pe scări este același proces ca cel explicat anterior, în ordine inversă (Imaginea 11).

AVERTIZARE
Vă rugăm să nu prindeți scaunul cu rotile peste suporturile pentru picioare, din cauza posibilităților de dezasamblare.

URCAREA UNEI RAMPE

Înclinați-vă trunchiul înainte și folosiți jantele de mână cu mișcări rapide, pentru a menține viteza corespunzătoare.

Dacă aveți nevoie de o frână sau de relaxare în timpul călătoriei, trebuie să vă asigurați că activați ambele frâne de parcare în același timp.

COBORÂREA UNEI RAMPE

Înclinați-vă trunchiul înapoi și lăsați roțile să se învârtă (ținând liber de cercurile metalice pentru autopropulsare)., asigurându-vă că aveți viteza și direcția sub control. Evitați schimbările bruște de direcție, nu încercați niciodată să urcați sau să coborâți o rampă în diagonală și nu încercați niciodată să întoarceți scaunul rulant în timpul urcării.

AVERTIZARE
Scaunul cu rotile nu este aplicabil ca scaun pentru mașini.

URCAREA / COBORAREA UNEI RAMPE CU ASISTENȚĂ

(A se vedea imaginea 14-16).

Toate drepturile rezervate. ©2025 UAB Kasko Group

FUNCȚIONAREA COTIEREI

Scaunul cu rotile este prevăzut cu cotieră detașabilă. Dacă este necesar să o scoateți complet, apăsați butonul metalic aflat în partea din față a cotierei, mențineți apăsat și ridicați cu grijă cotiera (Imagine 17 (a.)). Țineți-l împins și ridicați ușor cotiera. Pentru a-l pune la loc, vă rugăm să repetați acțiunile în direcția opusă (Imagine 18).

i În timpul manevrării scaunului cu rotile, cotierele trebuie să fie blocate.

REGLAREA ÎNĂLȚIMII SCAUNULUI

Roțile din față și din spate permit reglarea înălțimii scaunului.
Pentru a regla înălțimea roții din față, slăbiți șurubul cu o cheie hexagonală, scoateți-l, setați înălțimea dorită a roții și strângeți din nou (Imagine 19). Pentru a regla înălțimea roții din spate, slăbiți șurubul axului cu o cheie și introduceți roata în suportul axului. După instalare, strângeți-l din nou. Din motive de siguranță, vă recomandăm să păstrați roțile din față și din spate la aceeași înălțime.

DISPOZITIV DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RĂSTURNĂRII

Scaunul cu rotile SteelMan XL este echipat cu roți anti-înclinare (Imaginea 20). Scopul dispozitivelor de protecție împotriva răsturnării este de a preveni răsturnarea înapoi a scaunului cu rotile. Ele pot fi folosite și pentru a ajuta înclinarea scaunului de către o persoană însoțitoare.
Înălțimea roților se poate regla. Pentru aceasta, apăsați butonul de culoare aurie aflat pe cadru și glisați tubul.

FRÂNARE

Scaunul dvs. cu rotile are frâne montate pe cadru din ambele părți (Imagine 21). După livrare, frânele sunt reglate corect pentru a asigura o frânare adecvată. Pentru a acționa frânele, apucați maneta de frână și împingeți-o înainte.
Pentru siguranță maximă, se recomandă utilizarea simultană a ambelor frâne.

FUNCȚIONAREA SUPORTULUI PENTRU PICIOARE

Odată livrate, suporturile pentru picioare sunt ambalate într-un carton mic separat.Pentru montare, scoateți piesele din ambalaj. Suporturile pentru picioare se montează în partea din față a scaunului.
Pentru a le fixa, plasați suporturile pe cele două tije aflate pe cadru. Apoi rotiți suportul spre interior până se fixează în poziție (Figura 22).

i **Nu amestecați suportul de picior stâng și drept!**

După instalare, placa de picior din aluminiu trebuie să fie orientată spre interior. Odată ce părăsiți scaunul cu rotile, suportul pentru picioare trebuie răsturnat sau îndepărtat complet. Trageți mânerul de aluminiu și rotiți suportul pentru picioare spre exterior. Lungimea suportului se poate regla în funcție de nevoile utilizatorului. Pentru ajustare, slăbiți șurubul din partea de jos și trageți țeava interioară înăuntru sau în afară, în funcție de cât doriți să o scurtați sau să o lungiți.

Kid-Man® este o proprietate a UAB Kasko Group înregistrată la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.

ÎNTREȚINERE

Pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă, efectuați în mod regulat următoarele verificări și lucrări de întreținere sau încredințați-le unei alte persoane. Mai jos veți găsi programul de întreținere recomandat.

	Înainte de utilizare	O dată pe săptămână	O dată pe lună	O dată pe an
Verificați dacă roțile din spate sunt așezate corect		X		
Control vizual		X		
Verificați mecanismul de pliere			X	
Verificați frânele	X		X	
Curățați roțile din față			X	
Solicitați verificarea scaunului cu rotile de către un dealer autorizat				X

AVERTIZARE
Repararea, curățarea sau reglarea scaunului cu rotile trebuie efectuate de către o persoană autorizată în timp ce persoana nu stă în scaunul cu rotile.

CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE

Utilizați cârpa umedă pentru a curăța rama, precum și părțile din plastic. Este posibilă și utilizarea unui detergent ușor pentru murdăria mai persistentă. Roțile pot fi curățate cu o perie umedă din fibre sintetice (utilizarea periei de sârmă nu este permisă). Tampoanele scaunului și spătarului pot fi spălate. Utilizați detergent ușor. Utilizați un dezinfectant obișnuit neagresiv. Dacă nu sunteți sigur dacă cel pe care îl utilizați este potrivit pentru dezinfecție, vă rugăm să luați legătura cu distribuitorul local

Nisipul și apa de mare pot deteriora rulmenții, iar piesele din oțel pot rugini dacă suprafața este deteriorată. Expuneți scaunul cu rotile la nisip și apă de mare doar pentru perioade scurte și curățați-l după fiecare vizită la plajă.

Scaunul cu rotile poate fi dezinfectat prin pulverizare sau ștergere cu dezinfectanți testați, aprobați.

Pulverizați un produs de curățare și dezinfectare moale și urmați instrucțiunile date de producător.

Toate drepturile rezervate. ©2025 UAB Kasko Group

DEPOZITARE

Scaunul cu rotile trebuie depozitat într-un mediu uscat, ferit de lumina directă a soarelui. Când este depozitat, scaunul cu rotile poate fi pliat. Scaunul cu rotile trebuie să fie păstrat curat și fără praf. Acest lucru se poate face cu un ștergător de praf sau o cârpă umedă și un detergent ușor. Curățați regulat, utilizați un detergent neutru de uz general și apă caldă. Vă rugăm să verificați caracterul adecvat al detergenților înainte de utilizare. Nu utilizați detergenți abrazivi, deoarece acest lucru va deteriora permanent suprafața și va invalida orice garanție.

AVERTIZARE
Scaunul cu rotile nu trebuie expus permanent la temperaturi mai mari de +40°C. În caz contrar, cadrul, precum și scaunul, spătarul și cotierele se pot încălzi, ceea ce poate provoca arsuri.

AVERTIZARE
Nu depozitați niciodată alte obiecte deasupra scaunului cu rotile.

După o depozitare îndelungată (mai mult de 3 luni), scaunul cu rotile trebuie inspectat (vezi capitolul „ÎNTREȚINERE").

CONDIȚII DE MEDIU

Păstrați scaunul cu rotile în aceste condiții:
Limitare de temperatură –20°C până la +40°C;
Umiditate relativă 20% până la 75%;
Presiunea atmosferică 800 hPa până la 1060 hP.

REUTILIZARE

Scaunul cu rotile este potrivit pentru reutilizare. Ar trebui luate următoarele măsuri:
Curățare și dezinfecție (a se vedea capitolul „CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE");
Inspecție (a se vedea capitolul „ÎNTREȚINERE").

Scaunul cu rotile trebuie adaptat pentru noul utilizator în conformitate cu documentația serviciului.

ELIMINARE

Aveți grijă de mediul înconjurător și eliminați scaunul cu rotile în mod corespunzător. Eliminarea se face în conformitate cu reglementările naționale și locale.
Pentru ca scaunul cu rotile să fie reciclat în mod corespunzător, vă rugăm să contactați comunitatea locală, instalația de eliminare sau departamentul nostru de service.

Kid-Man® este o proprietate a UAB Kasko Group înregistrată la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.

SPECIFICAȚIE

Model	**SteelMan XL**	
REF	04-010B/51	04-010B/55
Lățimea scaunului (cm)	51	55
Lungimea totală (cm)	105	
Lățimea totală (cm)	Lățimea scaunului + 20 cm	
Înălțime totală (cm)	96 - 101	
Adâncimea scaunului (cm)	45	
Înălțimea scaunului (cm)	50 - 55	
Înălțimea spătarului (cm)	44	
Lungimea suportului pentru picioare (cm)	40 - 52	
Greutatea (kg)	26.2	26.7
Înălțimea brațului (cm)	23	
Dimensiunea roților din față (cm)	20 x 5	
Dimensiunea roții din spate (cm)	61 x 3.7	
Sarcina maximă de siguranță (kg)	180	
Cadru	Oțel	
Tapițerie	Nailon	

Toate drepturile rezervate. ©2025 UAB Kasko Group

Toate materialele utilizate sunt protejate împotriva coroziunii. Folosim numai materiale și componente conforme cu REACH.

INCIDENTE

**Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat la UAB Kasko Group | Kid-Man®
și la autoritatea competentă a statului membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.**

CONTACTE:
Producător: UAB "Kasko Group" (marcă înregistrată Kid-Man®)
Adresa: A.Vivulskio 12D, Vilnius, LT-03221, Lituania
Telefon: +370 5 265 0000
E-mail: info@kid-man.com
Site web: www.kid-man.com

Kid-Man® este o proprietate a UAB Kasko Group înregistrată la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.

Toate drepturile rezervate. ©2025 UAB Kasko Group