drive | DeVilbiss HEALTHCARE

BELLAVITA



Gebrauchsanweisung - Instrucțiuni de utilizare
Instructions for use - Mode d'emploi - Gebruiksaanwijzing - Istruzioni per l'uso - Instrucciones de uso

Cuprins

Prefață 16
Declarație de conformitate 16
Durata de viață 16
Plăcuță de identificare 16
Reutilizare 16
Garanție 16
Părți ale produsului 17
Descrierea produsului 18
Indicație 18
Pentru siguranța dumneavoastră 18
Reguli importante de siguranță 19
Compatibilitate electromagnetică (EMC) 19
Instalare și utilizare 19
Instalarea inițială în cadă 20
Fixați liftul pentru cadă la partea inferioară a căzii 20
Punerea/scoaterea huselor 22
Montarea tetierei (opțional) 22
Telecomandă manuală 22
Funcționarea în timpul îmbăierii 23
Scoaterea liftului din cadă 24
Întreținere și îngrijire 24
Curățare 25
Îngrijirea huselor 25
Asamblarea de noi dopuri de pernă pentru husa liftului de baie 25
Întreținere și îngrijire 25
Transport / utilizare mobilă 26
Date tehnice 27
Date tehnice Condiții de mediu pentru funcționare 27
Condiții de mediu pentru transport și depozitare 27
Eliminare 27

Prefață

Vă mulțumim că ați ales un produs Drive DeVilbiss.

Nu veți fi dezamăgiți de designul, funcționalitatea și calitatea acestui produs.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de prima utilizare. Acestea conțin informații importante privind siguranța și sfaturi valoroase pentru utilizarea și îngrijirea corespunzătoare. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de informații suplimentare, contactați dealerul specializat Drive DeVilbiss care v-a furnizat produsul.

Aceste instrucțiuni de utilizare conțin toate informațiile importante pentru reglare și funcționare. Cele mai recente instrucțiuni de utilizare sunt disponibile online în format PDF sau pot fi solicitate de la serviciul de asistență pentru clienți.

Pot fi afișate formate mărite pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Pacienții nevăzători trebuie să fie instruiți de către însoțitorul lor. Reparațiile, precum și unele ajustări necesită o pregătire tehnică specială și, prin urmare, trebuie să fie efectuate de către distribuitorul de materiale medicale.

Declarație de conformitate

Pentru produsul descris, DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG declară conformitatea în conformitate cu Regulamentul privind dispozitivele medicale (UE) 2017/745.

Durata de viață

Compania noastră presupune o durată de viață de cinci ani pentru acest produs, atâta timp cât produsul este utilizat conform destinației și sunt respectate toate cerințele de întreținere și service.

Această durată de viață poate fi depășită în mod semnificativ dacă produsul este manipulat, reparat, întreținut și utilizat cu atenție și dacă nu există limite tehnice bazate pe dezvoltarea ulterioară a științei și tehnologiei.

Cu toate acestea, durata de viață poate fi, de asemenea, scurtată în mod semnificativ prin utilizare extremă și necorespunzătoare. Determinarea duratei de viață de către compania noastră nu reprezintă o garanție suplimentară.

Plăcuță de identificare



1 Numărul articolului | 2 Denumirea articolului | 3 Producător | 4 Numărul de serie | 5 Codul UDI | 6 Sarcina maximă | 7 Urmați instrucțiunile de utilizare | 8 Dispozitiv medical | 9 Data de producție (an-lună)

Reutilizare

Acest produs poate fi reutilizat.
Vă rugăm să rețineți că toate documentele tehnice necesare pentru a asigura siguranța trebuie, de asemenea, să fie oferite noului utilizator.

Produsul trebuie verificat de către dealerul specializat, curățat și readus la starea optimă.

Respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului în timpul pregătirii; acestea sunt disponibile la cerere.

Accesoriile sunt disponibile de la distribuitorul dumneavoastră specializat sau la **www.drivedevilbiss.de**

Garanție

Drive Medical acordă o garanție de 5 ani pentru acest produs, precum și o garanție de 2 ani pentru baterie.

Piesele supuse uzurii nu sunt, în general, acoperite în timpul perioadei normale de garanție, cu excepția cazului în care piesele necesită reparații sau înlocuiri care au devenit necesare ca o consecință clară și directă a unei erori de fabricație sau de material.

Ne rezervăm dreptul la erori și modificări pe baza îmbunătățirilor tehnice și a modificărilor de design.

EXCLUDEREA GARANȚIEI

Piesele supuse uzurii includ (printre altele):
Hiuse și picioare de aspirare

Părți ale produsului



BELLAVITA

1. **Spătar**
2. **Suprafața scaunului**
3. **Clapete laterale**
4. **Mecanismul de ridicare cu foarfecă**
5. **Placă de bază**
6. **Picioare de aspirație**
7. **Pârghie de blocare**
8. **Cremalieră dințată**
9. **Telecomanda manuală**

Descrierea produsului

Vă mulțumim că ați ales un produs Drive Medical. Acest produs robust și de înaltă calitate vă va ușura de acum înainte intrarea și ieșirea din cadă pentru a face baie.

Liftul pentru cadă Bellavita respectă standardele valabile DIN EN ISO 10535 : 2006 și DIN EN 60601-1:1996.

Liftul pentru cadă Bellavita este alcătuit în principal din plastic de înaltă calitate, reciclabil, cu un design ușor. Prin urmare, poate fi transportat și depozitat cu ușurință și este potrivit pentru utilizarea acasă, precum și într-un azil de bătrâni sau în timpul călătoriilor.

Telecomanda manuală conține o baterie cu ioni de litiu.

Telecomanda manuală flotantă permite ridicarea și coborârea comodă în poziția normală de ședere. De asemenea, este posibil să se deplaseze liftul în poziții intermediare.

Motorul de acționare și componentele electronice de control au o carcasă etanșă la apă. Astfel, liftul poate fi utilizat și atunci când se face duș în cadă.

Cadrul robust cu înălțime reglabilă permite ridicarea și coborârea de la 6,5 la 48 cm în înălțime. Atunci când sunt apăsate butoanele de ridicare/coborâre, tija de ridicare ridică/coboară suprafața scaunului.

Unitatea electrică detașabilă, care poate fi pliată înainte și care are un spătar integrat, se fixează la locul său pe suprafața scaunului și se blochează automat după ce este ridicată. Acest lucru previne ca spătarul să fie pliat din greșeală.

Ca urmare a controlului integrat al energiei, liftul coboară numai dacă este disponibilă suficientă energie pentru a-l ridica complet.

La o frecvență medie de utilizare (o dată pe zi), se recomandă înlocuirea produsului după 5 ani (în funcție de starea generală a produsului).

Indicație

Ajutoarele de baie sunt produse care permit utilizatorului să efectueze în mod independent îngrijirea zilnică a corpului. Acestea compensează, în totalitate sau parțial, funcțiile limitate sau absente ale corpului. Obiectivul utilizării ajutoarelor corespunzătoare este de a permite persoanelor bolnave sau cu handicap să fie cât mai independente de ajutorul exterior în domeniul igienei.

Lift pentru cadă

Lifturile pentru cadă sunt folosite pentru coborârea de la înălțimea marginii căzii spre fundul căzii și invers. Este adecvat pentru utilizatorii care au limitări funcționale semnificative ale membrelor superioare și/sau inferioare care fac imposibilă intrarea și ieșirea independentă în și din cadă sau așezarea în șezut/susținere și pentru care utilizarea liftului permite din nou o baie independentă.



Pentru siguranța dumneavoastră

Informații care trebuie respectate!
O baie în siguranță cu liftul pentru cadă este posibilă numai dacă instrucțiunile de utilizare sunt citite cu atenție și dacă informațiile pe care le conțin sunt respectate cu atenție!

Informații importante

- Liftul pentru cadă nu trebuie folosit ca scară, un dispozitiv pentru a facilita intrarea și ieșirea în afara căzii, un ajutor pentru urcare sau coborâre, un suport, o platformă de ridicare sau altele asemenea. Acesta ar trebui să fie utilizat numai pentru îmbăierea persoanelor în interiorul căzii de baie.
- Copiii și animalele trebuie ținute departe de liftul pentru cadă.
- În caz de funcționare defectuoasă sau de deteriorare, vă rugăm să contactați imediat dealerul dumneavoastră. Nu efectuați nicio modificare sau conversie neautorizată. Reparațiile trebuie efectuate numai de către ateliere autorizate sau de către producător. Nerespectarea acestui lucru anulează orice cerere de garanție.
- Întindeți tija de ridicare numai atunci când spătarul este coborât!
- Funcționarea pe adaptoare de înălțime nu este permisă pentru liftul pentru cadă Bellavita.
- Nu depozitați produsul în apropierea directă a surselor de căldură.

Vă rugăm să păstrați cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare!

- În cazul în care liftul pentru cadă este transportat, telecomanda manuală trebuie deconectată în prealabil.
- Dacă liftul a fost expus pentru o perioadă lungă de timp la temperaturi scăzute (cum ar fi depozitarea îndelungată în timpul iernii într-un vehicul), acesta trebuie să poată fi readus la temperatura camerei înainte de utilizare pentru a evita deteriorarea.
- Atunci când folosiți uleiuri de baie sau săruri de baie, respectați doza recomandată. Aditivii pot afecta comportamentul de alunecare al mecanismului de ridicare cu foarfecă.
- Nu folosiți niciun detergent care conține oțet pentru a curăța liftul pentru cadă.

Informații despre baterie, unitatea de alimentare și telecomanda manuală:

- Folosiți telecomanda manuală numai pentru a acționa liftul pentru cadă.
- Liftul pentru cadă poate fi acționat numai cu o telecomandă manuală originală Drive Medical.
- Nu aruncați niciodată telecomandă manuală în foc și nu o depozitați lângă foc sau surse de căldură intensă.
- Nu deschideți telecomanda manuală. Deschiderea telecomenzii manuale anulează orice garanție.
- Utilizați numai sursa de alimentare furnizată pentru a încărca bateria în telecomanda manuală.
- Dacă carcasa telecomenzii manuale este deteriorată, nu mai trebuie utilizată.
- Pentru siguranța dumneavoastră, unitatea de alimentare trebuie utilizată numai în afara băii, în zone uscate. Unitatea de alimentare trebuie utilizată numai pentru încărcarea telecomenzii manuale furnizate.
- Bateria trebuie încărcată înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare a liftului pentru cadă. Dacă există perioade mai lungi în care liftul pentru cadă nu este utilizat, bateria trebuie reîncărcată la fiecare 3 luni pentru a prelungi durata de viață a acesteia.
- Nu introduceți obiecte conductoare (cum ar fi un ac de tricotat, un știft de metal etc.) în mufa jack a telecomenzii manuale.
- Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a curăța unitatea de alimentare.
- Curățați unitatea de alimentare numai cu o cârpă uscată.
- Liftul pentru cadă, unitatea de alimentare și bateria au o construcție robustă, totuși nu ar trebui să fie scăpate jos. În cazul în care există deteriorări externe vizibile și/sau audibile, liftul pentru cadă nu trebuie utilizat. În acest caz, contactați distribuitorul. Vă recomandăm să accesați adresa de la sfârșitul acestor instrucțiuni de utilizare!
- Pentru mai multe informații, detalii tehnice și adrese, vă rugăm să citiți întregul conținut al instrucțiunilor de utilizare.
- În cazul unei funcționări defectuoase, consultați mai întâi secțiunea intitulată "Depanarea" din anexa la aceste instrucțiuni de utilizare. Asigurați-vă că urmați informațiile și instrucțiunile de acolo. Pentru siguranța dumneavoastră, nu trebuie să folosiți liftul pentru cadă până când defecțiunea nu a fost remediată.

Reguli importante de siguranță

- Așezați-vă întotdeauna în mijlocul liftului, cu spatele pe spătar, întindeți ușor picioarele și puneți mâna liberă fie pe marginea căzii, fie în poală. Folosiți cealaltă mână pentru a controla ridicarea în jos sau în sus.
- În timpul ridicării sau coborârii, nu prindeți între marginea căzii și lift sau sub suprafața scaunului, deoarece acest lucru poate duce la răni.
- Persoanele cu handicapuri fizice grave sau cu confuzie mentală nu trebuie lăsate niciodată nesupravegheate în cadă. Faceți baie în mod independent numai dacă starea dumneavoastră de sănătate permite acest lucru. În caz contrar, faceți baie numai sub supraveghere.
- Înainte de a utiliza liftul pentru cadă, efectuați un test de funcționare (deplasați-l în sus și în jos ținând apăsat și verificați funcția OPRIRE DE URGENȚĂ).
- În cazul unei avarii, nu continuați să utilizați liftul pentru cadă; în schimb, reparați-l de către dealer.
- Nu aduceți obiecte (cum ar fi perii etc.) în cadă!

Compatibilitate electromagnetică (EMC)

Notă:

Acest produs îndeplinește cerințele de protecție enumerate în Directiva Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică (CEM, IEC 60601-1-2) (89/336/CEE).

Cu toate acestea, interferențele reciproce între dispozitivele electrice, în special atunci când se utilizează telefoane mobile, nu pot fi complet excluse în anumite condiții. Nu folosiți în apropierea liftului pentru cadă niciun dispozitiv de menținere a vieții, de susținere a vieții sau dispozitive care ar putea prezenta un risc pentru utilizatori în cazul unei defecțiuni.

Acestea ar putea funcționa defectuos în anumite condiții sau ar putea afecta buna funcționare a liftului pentru cadă. Dacă observați disfuncționalități sau un comportament neobișnuit al liftului pentru cadă sau al dispozitivelor electrice utilizate în apropiere, scoateți liftul pentru cadă din funcțiune și contactați dealerul.

Instalare și utilizare

Despachetare

Următoarele piese trebuie să fie prezente în cutie la livrare:

- Unitate de antrenare cu spătar integrat și telecomandă manuală
- Unitate de scaun cu clapete laterale
- Unitate de alimentare
- Instrucțiuni de utilizare
- 4 x ventuze, diametru 75 mm, pentru montare pe placa de baza


Dacă una dintre piesele enumerate lipsește sau este deteriorată, vă rugăm să contactați distribuitorul.

Cutia poate fi reutilizată pentru transport și pentru a depozita liftul pentru cadă.

Bateria trebuie să fie încărcată înainte de prima utilizare. Pentru a face acest lucru, trebuie urmate instrucțiunile din secțiunea „Încărcarea bateriei”.


Instalarea inițială în cadă

1. Introduceți mai întâi ventuzele din spate cu dopurile mobile în partea inferioară a plăcii de bază **(foto 1)**.

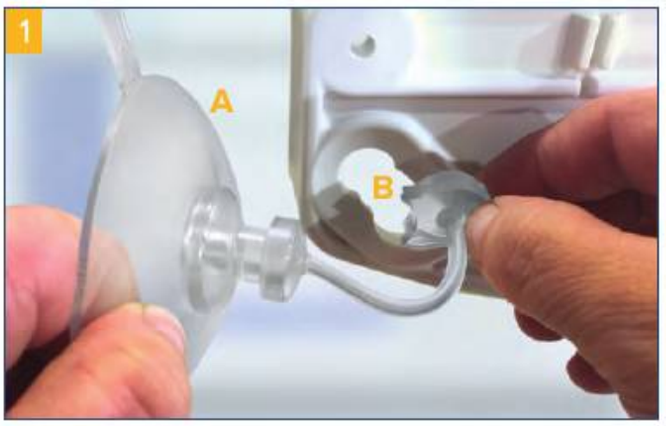

A) Cap de ciupercă | **B)** Ștecher

2. Împingeți capul de ciupercă al ventuzei prin mica deschidere, rotindu-l ușor în poziția finală. Asigurați-vă că filele de aerisire sunt orientate cu spatele **(fotografia 2)**.

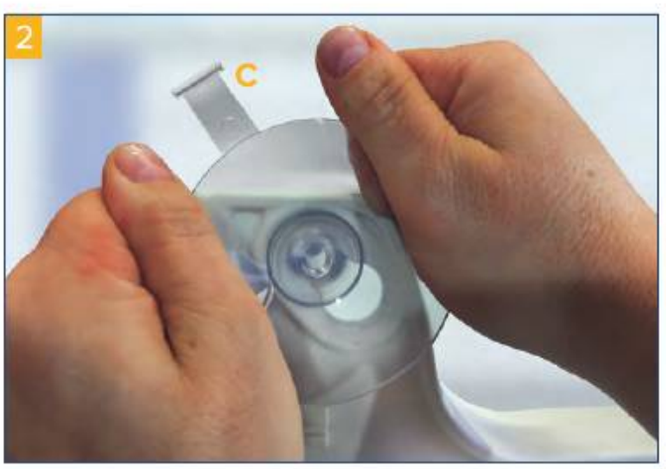


C) Piesă de aerisire

3. Împingeți fișa din partea superioară în orificiul plăcii până când aceasta este la același nivel **(foto 3)**.



4. Introduceți ventuza din față în același mod, însă în acest caz, împingeți suplimentar filetele de aerisire în locașurile plăcii de bază. Ca urmare, ventuzele din față sunt ventilate automat în timpul îndepărtării **(fotografia 4)**.

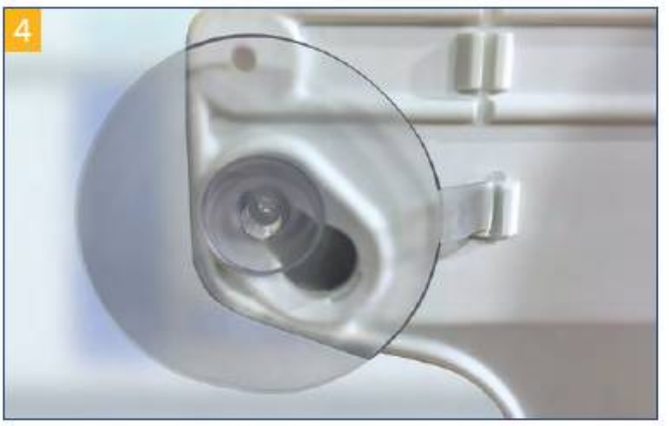


Fixați liftul pentru cadă la partea inferioară a căzii

Informații care trebuie respectate:

Ventuzele fixează liftul pentru cadă pe fundul căzii. Prin urmare, ventuzele de pe partea inferioară a liftului pentru cadă trebuie să fie curate și uscate atunci când acesta este utilizat în cadă, care este, de asemenea, curată și uscată. Vă recomandăm să curățați periodic ventuzele și cada cu detergenți disponibili în comerț pentru a asigura cea mai bună aderență posibilă.

1. Asigurați-vă că fundul căzii de baie goale este curat și că nu există covorașe antiderapante în cadă.
2. Așezați unitatea de scaun cu ventuzele montate pe placa de bază în cada goală, astfel încât ventuzele din spate să se afle la începutul pantei de pe peretele din spate al căzii.
3. Introduceți apoi unitatea de acționare cu spătar integrat, așa cum se arată în fotografia 5 - 6, cu ajutorul piedicilor de blocare în blocurile de rulmenți ale unității de scaun.



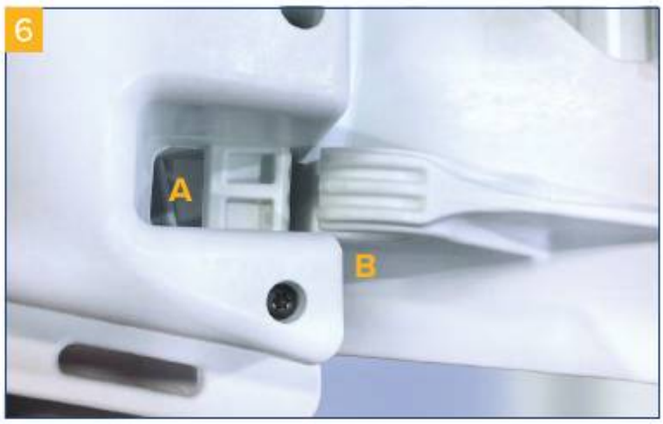


A) Bloc de rulment | **B)** Dispozitiv de blocare

Important! Trebuie să se asigure că ambele zăvoare de blocare au fost introduse în blocurile de rulmenți.

4. Folosiți acum cealaltă mână pentru a pivota spătarul în sus la mânerele de prindere **(foto 7-8)** și deplasați-l cât mai mult în spate până când unitatea de acționare se sprijină pe opritorul de pe placa de bază.



C) Mâner

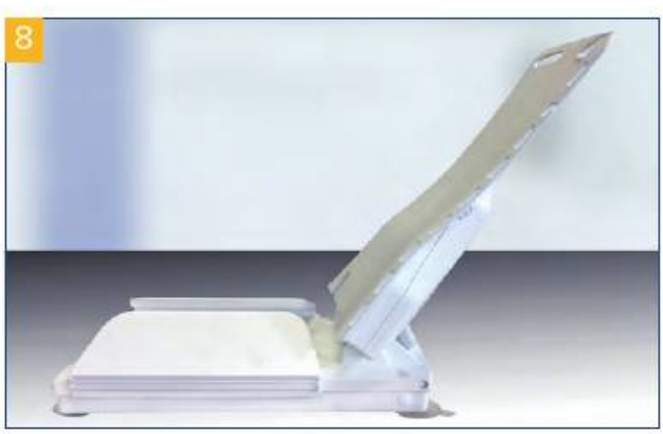

Notă: În cazul în care peretele căzii este vertical pe partea spătarului și, astfel, spătarul ar putea lovi peretele căzii, liftul trebuie să fie instalat în afara căzii și adus în poziția cea mai înaltă înainte de a fi introdus în cadă. Atunci când este utilizat în timpul unei băi, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să nu mai fie posibilă înclinarea spătarului, deoarece nu există suficient spațiu între spătar și peretele căzii.

5. Asigurați-vă că tija de ridicare este poziționată corect în rampă.

Asigurați-vă că pârghia de blocare roșie se află în poziția corectă (fotog. 9-10).




Corect



Incorect

6. Introduceți telecomanda manuală pe liftul pentru cadă. Pentru a face acest lucru, așezați mufa de pe cablul spiralat al telecomenzii manuale pe mufă până când aceasta se **fixează în mod vizibil și inelul roșu de pe mufă nu mai este vizibil.** Liftul pentru cadă este apoi gata de utilizare **(fotog. 11)**.

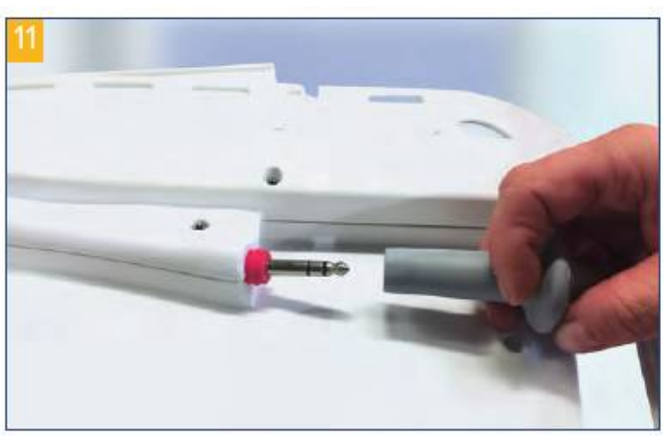

Punerea/scoaterea huselor

Husele pot fi puse și scoase cu ușurință.

Pentru a fixa husa, este suficient să o așezați în poziția corectă pe placa spătarului sau pe suprafața scaunului și să apăsați butoanele de fixare până la capăt în orificiile respective ale plăcii spătarului sau ale suprafeței scaunului și ale clapetelor laterale **(foto 12 - 15)**.



Husă de scaun



Husă pentru spătar



Husă de scaun



Husă pentru spătar


Liftul pentru cadă poate fi utilizat și fără husă de scaun.

Pentru a scoate huse, trageți cele două butoane de fixare din găurile de jos cu două degete.

Montarea tetierei (opțional)

Introduceți ambele tije ale tetierei în deschiderile din partea superioară a unității de acționare. Înălțimea dorită poate fi reglată în mod continuu **(fotog. 16 - 18)**.



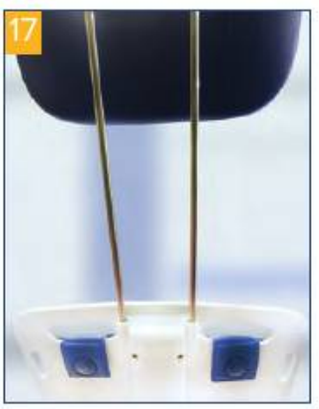



Telecomandă manuală

Capacitatea bateriei complet încărcate este suficientă pentru maximum 6 băi, în funcție de greutatea utilizatorului. În timpul băii, indicatorul luminos de pe telecomanda manuală este aprins și verde.

Atunci când starea de încărcare a bateriei scade la o anumită valoare, culoarea luminii se schimbă în galben și clipește încet. Acest lucru arată acum că se mai poate face încă aproximativ o baie. Ulterior, bateria trebuie încărcată în conformitate cu instrucțiunile.

Dacă se utilizează și faza galbenă a bateriei, culoarea luminii se poate schimba de la galben la roșu și poate clipi rapid. Dacă se întâmplă acest lucru, liftul se va deplasa doar în sus și, astfel, va asigura o ridicare sigură.

Bateria trebuie acum încărcată imediat în conformitate cu instrucțiunile, folosind unitatea de alimentare furnizată.

Lumina VERDE: Liftul este gata de utilizare.


Lumină galbenă: Liftul este parțial operațional, cu suficientă energie pentru o singură baie. Bateria trebuie să fie încărcată.

Lumină roșie: Liftul nu mai este gata de utilizare, se poate deplasa doar în sus. Bateria trebuie să fie încărcată imediat.

Buton OPRIRE DE URGENȚĂ (roșu): Dacă vă aflați vreodată într-o situație de urgență în care este necesar să opriți liftul pentru cadă, apăsați butonul roșu de OPRIRE DE URGENȚĂ **(foto 19)**.

Pentru a reactiva liftul pentru cadă, apăsați din nou butonul verde de alimentare. Dacă nu este apăsat niciun buton, telecomanda manuală se oprește automat după 30 de minute. Dacă doriți să opriți singur liftul pentru cadă, apăsați butonul roșu de pe telecomanda manuală (indicatorul luminos se stinge).

19

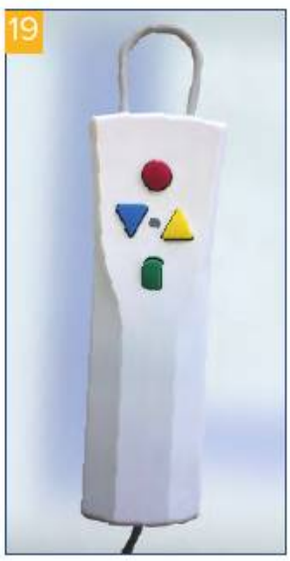

- Buton în jos (albastru)
- Butonul OPRIRE DE URGENȚĂ (roșu)
- Indicator luminos (LED)
- Buton în sus (galben)
- Buton de pornire (verde)

Funcționarea în timpul îmbăierii

1. Înainte de punerea în funcțiune inițială a liftului pentru cadă, asigurați-vă că telecomanda manuală este conectată corect la liftul pentru cadă prin intermediul fișei de conectare. Acesta este conectat corect atunci când inelul roșu de pe mufă nu mai este vizibil **(fotog. 20)**.

20



2. Apăsați butonul de alimentare (verde) de pe telecomanda manuală. Acum, indicatorul luminos este aprins și verde.
3. Apăsați acum butonul de sus (galben). Spătarul pivotează inițial în poziția verticală. Apoi, liftul se deplasează până la poziția finală și se oprește automat. Dacă butonul este eliberat, liftul se oprește, astfel încât sunt posibile și pozițiile intermediare.
4. Desfășurați clapele laterale până când se sprijină pe marginea căzii. Ridicați scaunul numai până când suprafața scaunului se află la aceeași înălțime cu marginea căzii, iar clapele laterale formează o suprafață orizontală.

Important: Clapele laterale trebuie să se așeze uniform pe marginea căzii.

5. Așezați persoana care urmează să fie îmbăiată pe liftul pentru cadă.
6. Pentru a coborî liftul pentru cadă, apăsați butonul de coborâre (albastru). Liftul coboară mai întâi în poziția finală. Apoi, spătarul pivotează automat spre înapoi. În poziția finală, unitatea de alimentare se oprește automat. Dacă butonul este eliberat, liftul se oprește, astfel încât sunt posibile și pozițiile intermediare.

Important! Când spătarul atinge peretele din spate al căzii, eliberați imediat butonul albastru.

7. După terminarea băii, apăsați butonul de ridicare (galben) de pe telecomanda manuală pentru a aduce liftul înapoi la înălțimea corectă (punctul final superior maxim). Asigurați-vă că clapele laterale nu se prind de mânerele de prindere existente ale căzii.
8. Ajutați persoana să iasă prin partea laterală a căzii.

Dacă telecomanda manuală nu este utilizată timp de 30 de minute, aceasta se oprește automat. Dacă doriți să opriți singur liftul pentru cadă, apăsați butonul roșu de pe telecomanda manuală (indicatorul luminos se stinge).

Notă:
Când ridicați și coborâți liftul, sprijiniți-vă de spătar și sprijiniți-vă mâinile în poală.

Dacă liftul rămâne în cadă, telecomanda manuală cu bateria integrată trebuie deconectată și încărcată. Acest lucru previne golirea accidentală a bateriei.

Scoaterea liftului din cadă

Folosiți mai întâi telecomanda manuală pentru a coborî liftul pentru cadă până la capăt și permiteți spătarului să pivoteze complet înapoi până când unitatea de alimentare se oprește singură în poziția finală **(foto 21)**. În acest fel, asigurați-vă că spătarul nu se lovește de peretele căzii. Apoi scoateți din priză telecomanda manuală.

1. Rabatați clapele laterale de pe suprafața scaunului spre interior.
2. Rabatați spătarul spre înainte. Pentru a ține liftul, utilizați mânerele de pe unitatea de acționare.



3. Trebuie să vă asigurați că tija de ridicare este întotdeauna complet retrasă **(foto 23)**.



Incorect



Corect

2. Unitatea de acționare poate fi acum îndepărtată de pe cadrul scaunului în direcția săgeții.

Notă: Unitatea de acționare poate fi îndepărtată numai într-un anumit unghi. Prin urmare, acesta nu mai poate fi scos din unitatea de scaun atunci când este pliat complet înainte, deoarece este blocat din nou în poziție. Aduceți spătarul în unghi, așa cum se arată în fotografia 24, apoi scoateți unitatea de acționare din cadrul scaunului în direcția săgeții.

4. Eliberați ambele ventuze din spate de pe placa de bază, trăgând de file. Apoi ridicați placa de bază înapoi, ceea ce va face ca ventuzele din față să se aerisească și să se elibereze automat. Acum scoateți unitatea de scaun din cadă.



Întreținere și îngrijire

Întreținerea liftului pentru cadă

Liftul pentru cadă este echipat cu rulmenți și suprafețe de sprijin care nu necesită întreținere. Prin urmare, nu este necesară nicio lubrifiere.

Întregul lift pentru cadă trebuie să fie inspectat periodic (inspecție vizuală de către utilizator), cel puțin o dată la 6 luni. Aceasta include o inspecție vizuală, în special a pieselor portante și a dispozitivelor de siguranță, precum și toate testele de funcționare necesare.

În cazul în care acest lucru dezvăluie defecte, uzură sau alte deteriorări care pun în pericol siguranța ridicării liftul pentru cadă trebuie scos din funcțiune și deficiențele trebuie corectate. Reparațiile trebuie efectuate de către persoane calificate în mod corespunzător și care pot efectua în mod corespunzător reparații de acest tip pe baza formării, cunoștințelor și experienței dobândite prin muncă practică.

Solicitați ca reparațiile să fie efectuate numai de către dealerul autorizat.

Atenție: Telecomanda manuală poate fi deschisă numai de către producătorul liftului pentru cadă!

Curățare

Liftul trebuie curățat imediat după utilizare (de preferință prin clătire cu apă caldă) pentru a-l menține în condiții optime. Pentru curățare, liftul pentru cadă trebuie clătit bine după fiecare baie. Pentru a curăța liftul pentru cadă (fără huse), utilizați detergenți de uz casnic fără agenți de curățare, precum și dezinfectanți disponibili în comerț.

Îngrijirea huselor

Materialul husei detașabile este igienic datorită suprafeței netede și proprietăților antibacteriene.

Îngrijirea husei necesită o curățare regulată, fie manuală, fie în mașina de spălat la 60°C. Utilizați un detergent nebiologic fără enzime. Rețineți că aditivii de baie care conțin ulei și pe care îi folosiți în timpul băii pot păta husa. Necurățarea în mod regulat a huselor poate cauza, de asemenea, decolorarea acestora.

Notă: Orice decolorare a huselor nu este acoperită de garanție, deoarece acestea sunt piese consumabile.

- Husele pot fi îndepărtate cu ușurință pentru curățare.
- Nu uscați husele în uscător; în schimb ar trebui să fie atârnate la uscat.
- În plus, se recomandă utilizarea unui dezinfectant disponibil în comerț.
- Urmați instrucțiunile producătorului!

Asamblarea de noi dopuri de pernă pentru husa liftului de baie

Mai întâi ghidați noul dop de sus prin gaura din pernă și apoi apăsați pe partea inferioară a discului pentru întărire **(foto 25 - 26)**.





Întreținere și îngrijire

Întreținerea unității de alimentare
Unitatea de alimentare nu necesită întreținere. Carcasa trebuie curățată numai cu detergenți fără solvenți sau cu o cârpă ușor umezită. În acest fel, asigurați-vă că nu pătrunde umezeala în unitatea de alimentare. Înainte de a porni din nou, trebuie să vă asigurați că unitatea de alimentare este complet uscată. Dacă este necesar, unitatea de alimentare trebuie plasată într-un loc uscat și ventilat timp de mai multe ore fără sursă de alimentare.

Atenție:
Pentru curățare, unitatea de alimentare trebuie să fie complet separată de rețeaua electrică prin deconectarea acesteia de la priză.

Încărcarea bateriei
Încărcați complet bateria înainte de fiecare utilizare. Informațiile privind tensiunea de pe unitatea de alimentare trebuie să fie în concordanță cu tensiunea sursei dvs. de alimentare.

1. Introduceți mufa unității de alimentare în mufa jack de pe cablul spiralat al telecomenzii manuale până când mufa se fixează cu un clic.
2. Conectați unitatea de alimentare la o priză.
3. Indicatorul luminos roșu de pe telecomanda manuală este aprins în roșu până când bateria este încărcată. Apoi este aprins și verde. Dacă bateria trebuie încărcată complet, lăsați-o conectată la unitatea de alimentare. Sistemul de control al unității de alimentare încheie procesul de încărcare după cca. 4 ore. Astfel se evită supraîncărcarea bateriei.
4. Deconectați unitatea de alimentare de la priză.
5. Scoateți mufa unității de alimentare din priza jack de pe comanda manuală.

Informații importante:
Dacă indicatorul de încărcare nu se aprinde după conectarea telecomenzii manuale, verificați următoarele puncte:

- Calitatea conexiunilor (mufă introdusă complet în priza de încărcare).
- Verificați dacă sunt deteriorate telecomanda manuală, cablul spiralat cu mufă jack și cablul de încărcare.

Notă:
Dacă unitatea de alimentare este deteriorată, returnați-o furnizorului pentru inspecție.

Transport / utilizare mobilă

În cazul **utilizării mobile**, ar trebui să se țină cont și de următoarele:

1. Telecomanda manuală a liftului pentru cadă trebuie deconectată și transportată separat.
2. În timpul transportului (de exemplu, într-un vehicul), asigurați întotdeauna liftul pentru cadă împotriva alunecării.
3. Dacă bateria integrată în telecomanda manuală este expusă la temperaturi scăzute (cum ar fi iarna, în timpul depozitării într-un vehicul), lăsați bateria să se încălzească la temperatura camerei și încărcați-o, dacă este necesar.
4. Țineți cont de greutatea produsului atunci când îl ridicați: unitatea de scaun cântărește aproximativ 5,5 kg, iar unitatea de acționare (fără comandă manuală) cântărește aproximativ 3,8 kg.

Transportare ca secțiuni separate
Scaunul și unitatea de acționare pot fi transportate cu ușurință cu ajutorul celor două mânere.



Transportare în stare blocată
Liftul pentru cadă poate fi transportat și ca unitate completă.



Date tehnice	
Lungime totală	830 mm
Lățime totală	700 mm
Lățimea scaunului	380 mm
Adâncimea scaunului	420 mm
Lungimea totală a suprafeței scaunului	570 mm
Înălțimea scaunului, min.	65 mm
Înălțimea scaunului, max.	480 mm
Înălțimea spătarului	640 mm
Lățimea spătarului	320 - 360 mm
Reglarea spătarului	10° - 50°
Lățimea plăcii de bază	310 mm
Lungimea plăcii de bază	560 mm
Sarcina maximă	140 kg
Greutatea totală fără telecomanda manuală	9,3 kg
Greutatea totală cu telecomanda manuală	9,7 kg

Condiții de mediu pentru funcționare	
Temperatura	+10° - +50°
Umiditatea relativă a aerului	10 ..... 100%
Presiunea aerului	700 hPa ..... 1060 hPa

Condiții de mediu pentru transport și depozitare	
Temperatura	–10°C .....+40°C
Umiditatea relativă a aerului	10 ..... 100%
Presiunea aerului	700 hPa ..... 1060 hPa


Eliminare


Dacă nu mai aveți nevoie de acest produs, vă rugăm să contactați dealerul specializat sau să aduceți produsul la centrul local de eliminare a deșeurilor.

Eliminarea și recuperarea echipamentelor și ambalajelor vechi trebuie să se facă în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Dispozitivele care intră sub incidența Legii privind echipamentele electrice și electronice (ElektroG) sunt listate de către fundația "Elektro-Altgeräte-Register" [registrul național al echipamentelor electrice și electronice vechi] ca dispozitive medicale pentru utilizatorul profesionist B2B.

Numărul nostru de înregistrare este: DE 33275322



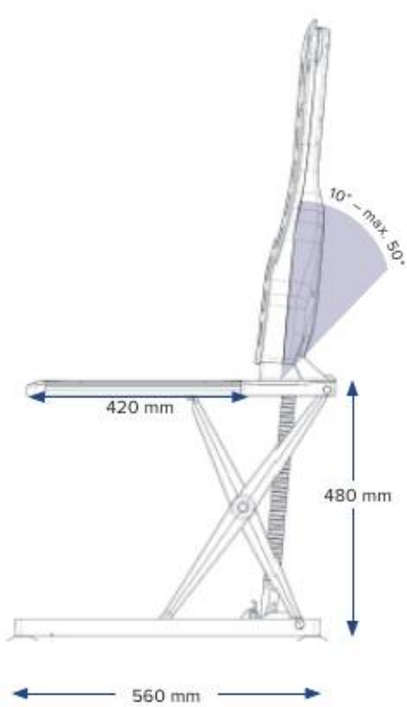

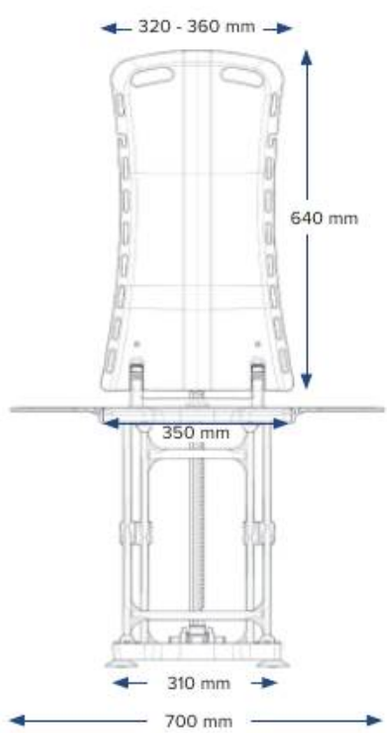

Dealerul dvs. specializat:

Sub rezerva erorilor și a modificărilor
Ultima actualizare: 06.10.2020
Versiunea: MDR-1.0

Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44 • 88316 Isny/Allgäu •Germania
T +49 7562 9724 0 • **F** +49 7562 9724 25
www.drivemedical.de • info@drivemedical.de